


## 『easy ECG training』(iOS/Android アプリ)

### お詫びと訂正

弊社 iOS および Android アプリ『easy ECG training』内に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

#### 『easy ECG training』

“Tips on reading ECG monitor” “Fundamentals : How to read the ECG”→“Skill7 : Ladder diagram” 8 画面目

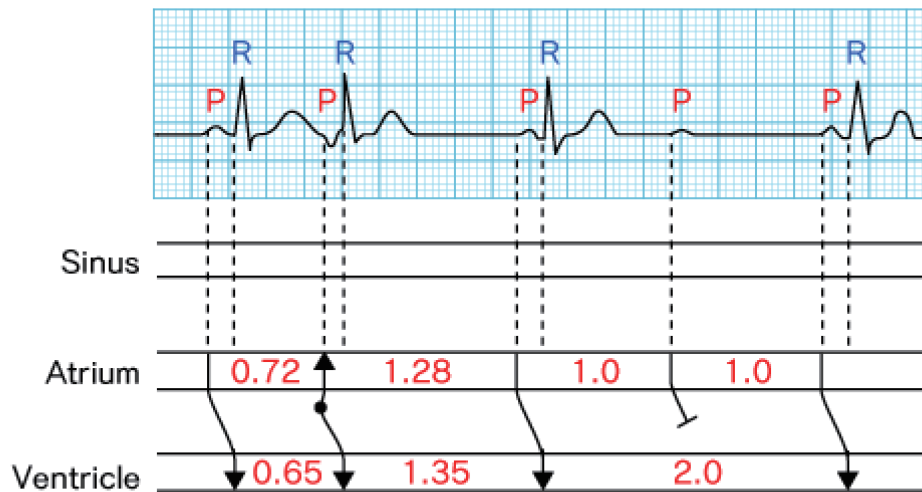


波形と数値が一致しておりません。正しい波形の間隔については「らくらく心電図トレーニングDS」の取扱説明書 22 ～ 23 ページをご参照ください。



取扱説明書 22 ～ 23 ページ

● 上室性期外収縮 (PVC)


- ① RR 間隔は不規則
- ② QRS の幅は狭い

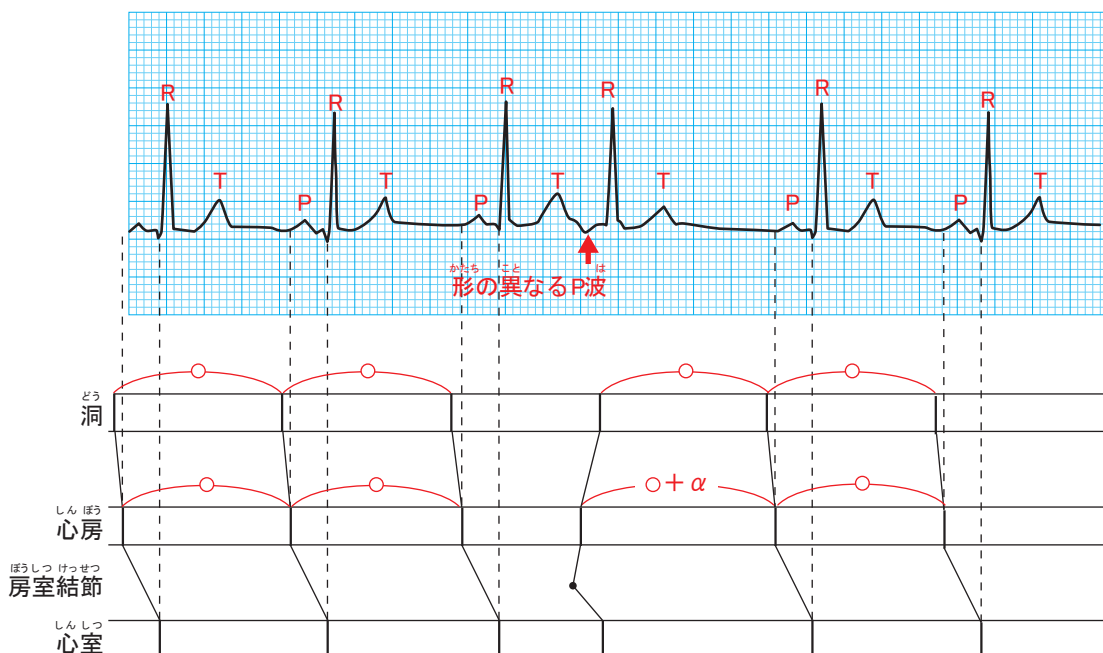

参考資料：取扱説明書 18 ～ 19 ページ

● せいじょう どうちようりつ  
正常洞調律 (NSR)

- ① RR 間隔は規則的  
② 心拍数は 60 ～ 100 回／分
- ③ P 波はあり  
④ QRS の幅は狭い

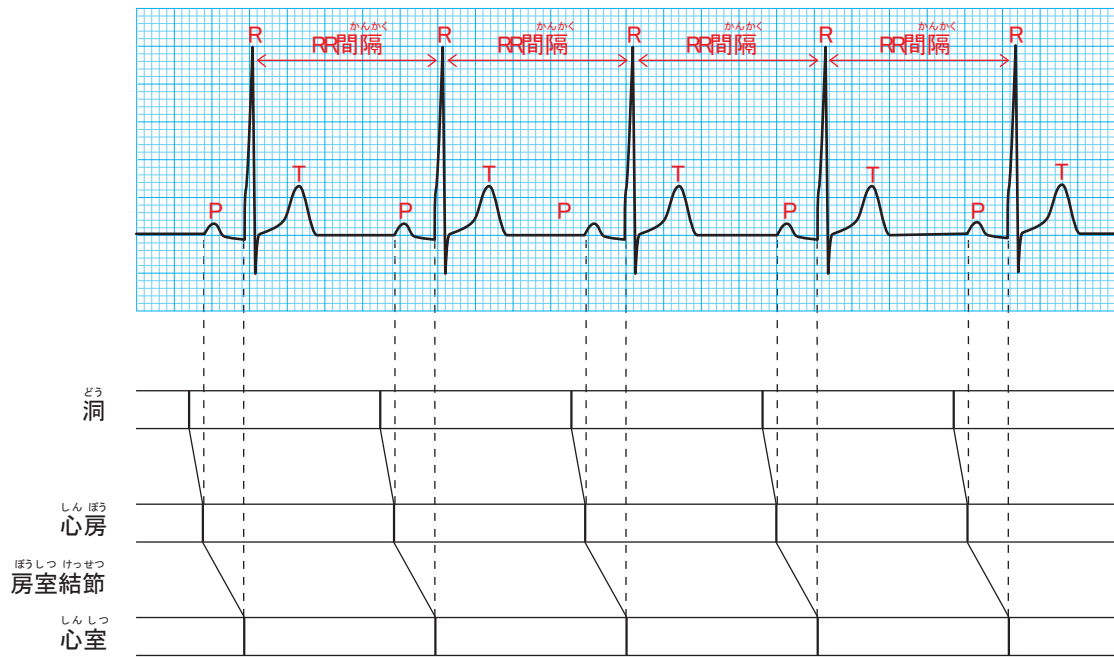

参考資料：取扱説明書 20 ～ 21 ページ

● たんげん せいしんしつ せい き がりしゆうしゆく  
単源性心室性期外収縮 (PVC)

- ① RR 間隔は不規則  
② QRS の前に P 波はなし
- ③ いつも形が同じ幅広 QRS が出現する

